


Überblick

zur Verwendung bei
Sensor- oder
Thermoelement- Tests
Variable Temperaturen
über entsprechende
Temperiergeräte
einstellbar
Temperiergeräte können
separat bezogen werden

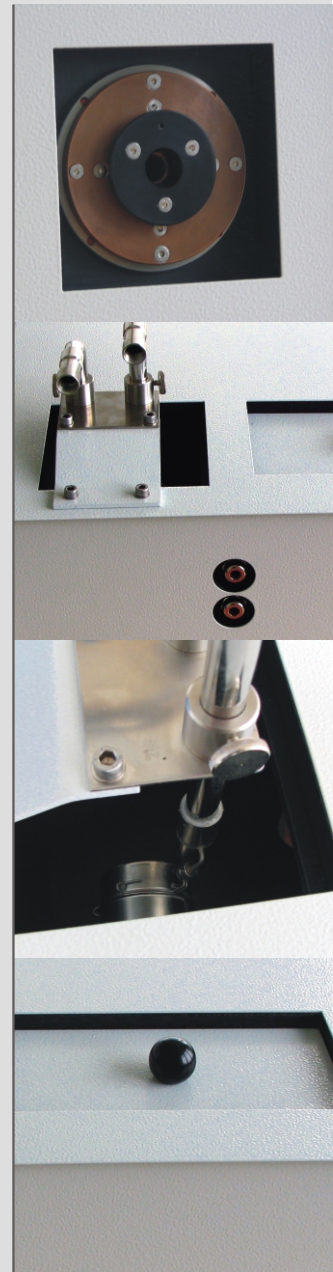

Schwarzkörperstrahler TE-01

Strahler für die Bereitstellung einer exakten Temperatur für Messvorgänge.

Das Gerät wird mit temperiertem Wasser betrieben. In einem isoliertem Becken mit Zu- und Ablauf herrscht eine konstante Temperatur, die aufgrund des Beckenvolumens eine große Trägheit aufweist. Über eine Öffnung besteht die Möglichkeit Sensoren oder Fühlinstrumente mit der exakten Temperatur des Strahlers zu beaufschlagen.

Der Schwarzkörperstrahler bietet die Möglichkeit Thermische Bauelemente unter konstanten Bedingungen zu testen und zu justieren.